

PRICE

RAYiOS本体価格	1,200,000円 (税別)
------------	-----------------

本体スペック

スキャン領域	14 (W) × 14 (H) mm
定格電圧・周波数	AC100～240V 50/60Hz
精度	20 μm (シングルクラウン)
スキャン方式	Digital structured light projection
重さ	280g
サイズ	43 (W) × 263.5 (D) × 49.4 (H) mm
チップ(オートクレーブ滅菌)	100回まで

推奨PCスペック

CPU	Intel Core i9-11900H
RAM	32 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB
OS	Windows 10 pro 64 bit

関連製品



Wall Mount

スキャナー用カート
400(W) x 450(D) x 860(H) mm
約 20kg

安心のトータルサポート

無償保証
1年訪問および
遠隔サポート

交換サポート

交換対象
・センター
・サーバーPC & モニター
・その他部品RAY*iOS*

販売名:レイ iOS 一般の名称:デジタル印象採得装置 (歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット) 設置管理医療機器・特定保守管理医療機器 承認番号:30500BZ100005000

お問い合わせ

Ray Japan 03-5829-9935

東京本社 〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-6 PMO浜松町 II 2F
大阪CSセンター 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-11 第2喜己ビル701
福岡CSセンター 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2-2-5 Storefront 702
札幌CSセンター 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西12丁目1-27 レゾ札幌1階A



【公式HP】
お問い合わせ
その他製品情報は
こちらから。
www.raydental.jp

RAY*iOS*

口腔内スキャナー

Digital Dentistry



For your Best Digital Experience

RAY*i*OS

Digital Dentistryへの第一歩



曇り止め機能



スキャンON/OFF



状態表示LED



電源
ON/OFF

特長

優れたコストパフォーマンス
価格以上の性能を体験できます。



オープンシステム
様々なソフトウェアと連携可能な
STL/PLY/OBJデータを
取得できます。



Full HDの精細な映像
リアルな色調でマージンラインまで
鮮明に表示されます。



人間工学的デザイン
重心の安定性と高いグリップ感を追求し
スキャンがもっと楽になります。



高精度スキャンデータ
最先端の映像技術を取り入れ
高い精度のデータを取得できます。




パウダーレス
パウダーなしでもスムーズにスキャンできます。

RAYiOSで広がる歯科診療の可能性



2D Photo

フォート機能によりデータ保存・共有が
可能なためカウンセリングやカルテ作成に
役立ちます。

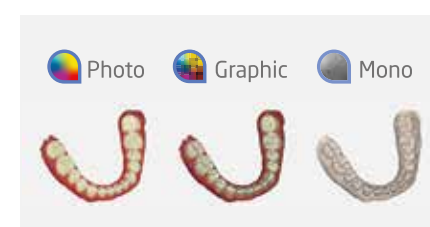

Color mode

カラーモードを選択できます。



Lock area

エリアを選択し、ロックをかけると
同じエリアを続けてスキャンしても
データは上書きされません。



Trim

スキャンデータを簡単に修正できます。



Bite analysis

閉塞を分析できます。



Implant

インプラント治療に必要なScan bodyや
Scan postをスキャンできます。